

Description:

Test strips for determining the silver concentration and the pH value in fixing baths.

Pack content:

1 aluminium container with 100 test strips

Hazard warnings:

This test does not contain any hazardous substances that require mandatory labelling.

General indications:

Remove only as many test strips as are required. Close the container immediately after removing a strip. Do not touch the test field.

Additional indications:

1. Ag-Fix cannot be used for fixing baths with pH values lower than 4.
2. To achieve a more exact determination of the silver content in concentrated solutions (more than 5 g silver per liter), dilute the solution with water in a ratio of 1:1 or 1:2. This will move the silver concentration value to the lower range of the test strip, where the reaction is the most sensitive.

Instructions for use:

1. Dip the test strip shortly in the fixing bath.
2. Shake off excess liquid.
3. Wait 30 seconds.
4. Compare with the color scale.

Depending on the silver concentration, the yellow test field furthest away turns brown. The pH value can be determined at the same time.





Interferences:

Iron and copper ions will interfere, resulting in a false-positive reaction. These ions can be determined with the rapid tests QUANTOFIX® Total iron 100 (REF 913 44), QUANTOFIX® Total iron 1000 (REF 913 30) and QUANTOFIX® Copper (REF 913 04).

Storage:

Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (storage temperature not above +30 °C).

If correctly stored, the test strips may be used until the use-by-date printed on the packaging.

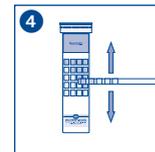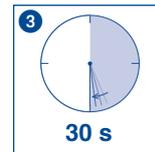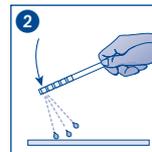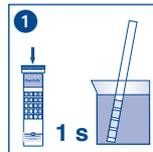

	Haltbarkeitsdatum / Use by / A utiliser jusqu'à / Fecha de vencimiento / Houdbaarheidsdatum / Data di scadenza / Data ważności	LOT	Chargenbezeichnung / Lot number / Numéro de lot / Número de lote / Lotnummer / No del lotto / Oznaczenie szarży
REF	Artikelnummer / Catalog number / Référence / Art. nro. / Referentienummer / Codice articoli / Numer artykułu	Σ	Packungsinhalt / Package content / Contenu de la boîte / Contenido del envase / Verpakkingsinhoud / Contenuto della confezione / Zawartość opakowania
	Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty		Vor Feuchtigkeit schützen / Protect from humidity / Protéger de l'humidité / Protección de la humedad / Beschermen tegen vocht / Proteggere dall'umidità / Chronić przed wilgocią
	Lagertemperatur / Storage temperature / Température de stockage / Temperatura de almacenaje / Bewaartemperatuur / Temperatura di magazzino / Temperatura przechowywania		Packungsbeilage lesen / Please read instructions / Lire les instructions, svp / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Leggere il foglio informativo / Należy przeczytać ulotkę informacyjną
	Sicherheitshinweise in der Packungsbeilage beachten / Observe the safety precautions in instructions / Respecter les précautions de sécurité des instructions / Obsérvense las indicaciones de seguridad / Neem de veiligheidsrichtlijnen in de bijsluiter in acht / Seguire le avvertenze di sicurezza / Należy przestrzegać uwag zawartych w ulotce informacyjnej		